

health is the priority



Av. João Batista Leone, 240  
Parque Empresarial  
Adelelmo Corradini Itatiba SP  
CEP-13.257-573  
vendas@equipdiagnostica.com.br  
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA  
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR



## EXR 110/120

Analizador de  
imunocromatografia  
por fluorescência



EXR 120



Parâmetros

- Princípio  
Método de imunocromatografia por fluorescência
- Canal  
3
- Tempo de teste  
3-15 min
- Tipo de amostra  
Sangue total/Plasma/Soro
- Temperatura de incubação  
30°C
- Transmissão de dados  
Rede com fios(EXR 110) e Wifi (EXR 120)
- Sistema operacional  
Linux
- Tela  
8 polegadas
- Modo de teste  
Modo Padrão/Rápido
- Leitura do cartão  
Cartão RFID
- Capacidade de armazenamento  
Interno 29000 testes (EXR 110) e 28000 testes (EXR 120)  
externo via USB-PENDRIVE
- Atualização de software  
Por USB ou Internet
- Fonte de energia  
100-240V AC, 50/60Hz, 1.4-0.7A
- Umidade relativa  
20%-85%
- Temperatura  
10-30°C
- Peso  
3.2 Kg (EXR 110) 3.7(EXR 120 com bateria)
- Dimensões  
275mm\*250mm\*186mm
- Bateria  
Bateria de lítio embutida com 5000mAh (EXR 120)



Saiba tudo sobre este equipamento no nosso site

EXR 110/120

Analizador de imunocromatografia por fluorescência



Compacto e eficiente

EXR 110/120 é um analisador quantitativo portátil para diagnóstico in-vitro com base na tecnologia de imunoensaio por fluorescência que integra operação, análise e exibição de resultados. Ele pode completar automaticamente através de código de barras uma série de operações, incluindo carregamento de cartões de teste, identificação do item, e carregamento de amostras, incubação, detecção, descarte de cartões e impressão dos resultados em até 15 minutos. Portanto, o EXR 110/120 foi projetado para fornecer resultados de diagnóstico de forma rápida e fácil.



Rápido



Preciso



Conveniente



Inteligente



Portátil



Módulo de teste automático

- Reconhecimento automático de informações do item
- Incubadora com temperatura estável
- Tecnologia avançada de marcação de microesferas fluorescentes de elementos de terras raras



Aspecto

- Tamanho:275mm\*250mm\*186mm
- Peso: 3.2 Kg



Tela

- Tela colorida de 8 polegadas, sensível ao toque
- Monitoramento em tempo real
- Interface do usuário intuitiva e de fácil utilização




Impressora

- Impressão em tempo real com impressora térmica embutida.
- Impressora externa também disponível (consulte).



Conexão

- Transmissão de resultados com LIS via rede com fio no EXR 110 e wifi no EXR 120.

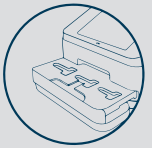

Canal de teste

- Teste Teste flexível "Single" 1 teste por vez, ou "Multi" até 3 testes diferentes por vez.
- Modo duplo "Rápido" com incubação interna, ou "Padrão" com incubação externa.
- Tempo de resultado 3 a 15 minutos.

